

INFORMACIÓN GENERAL

12121 2 222 121 22 221 2 2 22 2 22221 2

21 2 222 Ideal para la homogeneización rápida de muestras biológicas (lisis de células y homogeneización de tejido blando) y para aplicaciones que involucran líquidos y suspensiones, incluyendo mezclas o emulsiones. Diez niveles de velocidad ajustables que permiten regular la velocidad entre 8000 y 30000 rpm. Apto para volúmenes entre 0,1 ml y 250 ml. Viscosidad máxima de 5000 mPas. Potencia de entrada de 160 W y potencia de salida de 110 W. De peso ligero y operable con una mano. Incluye un soporte y una sonda rotor-stator de 10 mm (de acero inoxidable 316L, resistente a la corrosión y autoclavable); otras sondas rotor-estator disponibles como accesorios. Dimensiones exteriores (L x A x H): 55 x 57 x 210 mm. 200-240 V / 50-60 Hz, grado de protección IP20. Garantía 2 años

ES



El producto es conforme a las especificaciones definidas en la directiva europea que le incumbe



DATOS TÉCNICOS



referencia	descripción	unidades por ref.
RSHO-250-001	homogeneizador de rotor-estator portátil, RSH-1	1
RSHO-A01-001	soporte	1
RSHO-A02-001	sonda rotor-estator de 5 mm	1
RSHO-A03-001	sonda rotor-estator de 7 mm	1
RSHO-A04-001	sonda rotor-estator de 10 mm	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
RSHO-250-001	13,68	2,74	8479820090	08434868001831
RSHO-A01-001	6,84	1,79	84799070	08434868001992
RSHO-A02-001	0,117	0,08	84799070	08434868002005
RSHO-A03-001	0,117	0,08	84799070	08434868107991
RSHO-A04-001	0,117	0,08	84799070	08434868108004

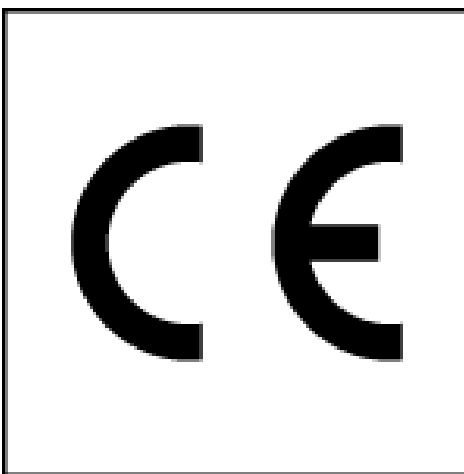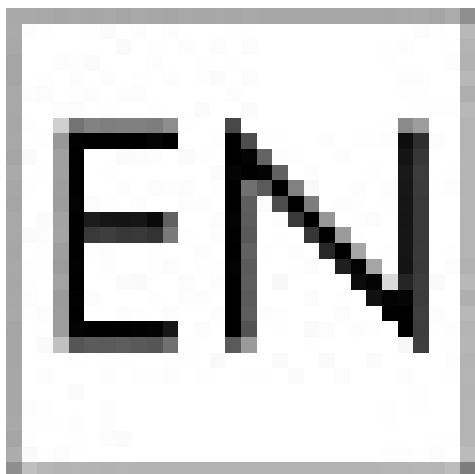

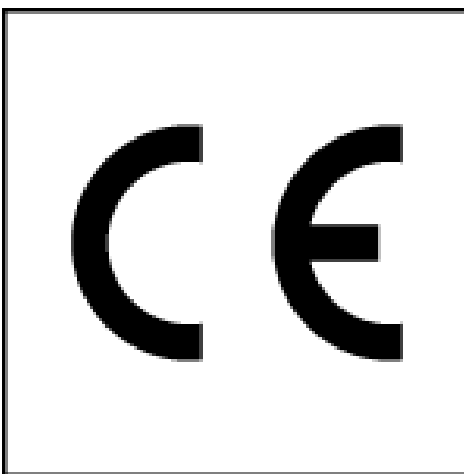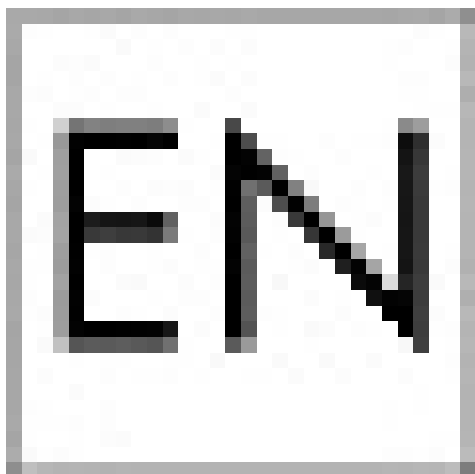

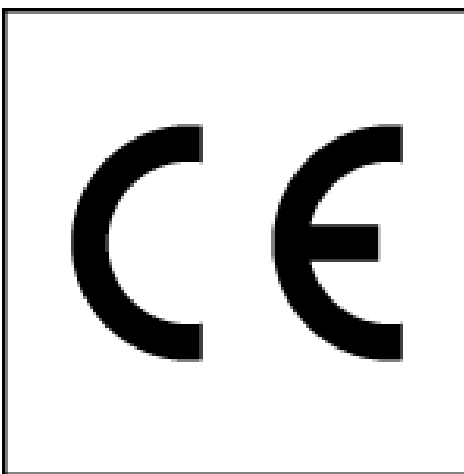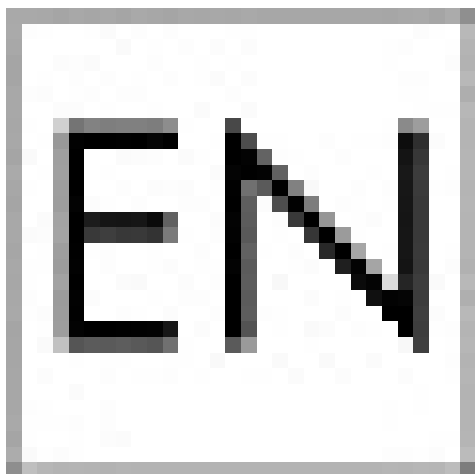

INFORMAZIONE GENERALE

1??1 ?? ? ???? 1?1 ?? ? 1?? ??1?? ? 1??2 1??1 ??

? **?** **?** **?** Ideale per l'omogeneizzazione rapida di campioni biologici (lisi cellulare e omogeneizzazione di tessuti molli) e per applicazioni che coinvolgono liquidi e sospensioni, inclusi miscele o emulsioni. Dieci livelli di velocità regolabili che consentono di regolare la velocità tra 8000 e 30000 rpm. Adatto per volumi compresi tra 0,1 ml e 250 ml. Viscosità massima di 5000 mPas. Potenza in ingresso di 160 W e potenza in uscita di 110 W. Leggero e utilizzabile con una mano. Include un supporto e una sonda rotore-statore da 10 mm (in acciaio inossidabile 316L resistente alla corrosione e autoclavabile); altre sonde rotore-statore disponibili come accessori. Dimensioni esterne (L x l x h): 55 x 57 x 210 mm. 200-240 V / 50-60 Hz, grado di protezione IP20. Garanzia di 2 anni





Conforme alle specifiche definite nella direttiva europea



DATI TECNICI

referenza	descrizione	unità per ref.
RSHO-250-001	omogeneizzatore rotor-stator portatile, RSH-1	1
RSHO-A01-001	supporto	1
RSHO-A02-001	sonda rotor-statore da 5 mm	1
RSHO-A03-001	sonda rotor-statore da 7 mm	1
RSHO-A04-001	sonda rotor-statore da 10 mm	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
RSHO-250-001	13,68	2,74	8479820090	08434868001831
RSHO-A01-001	6,84	1,79	84799070	08434868001992
RSHO-A02-001	0,117	0,08	84799070	08434868002005
RSHO-A03-001	0,117	0,08	84799070	08434868107991
RSHO-A04-001	0,117	0,08	84799070	08434868108004

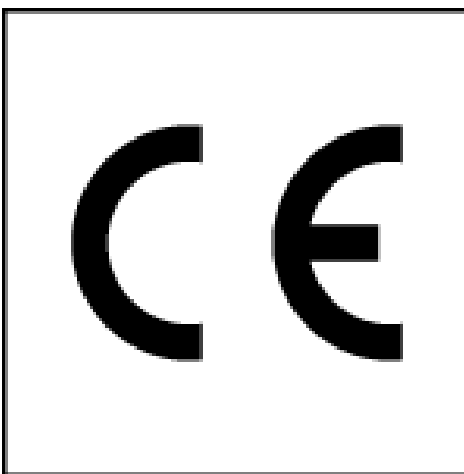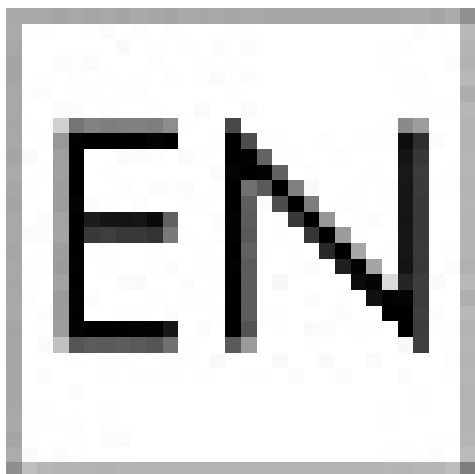

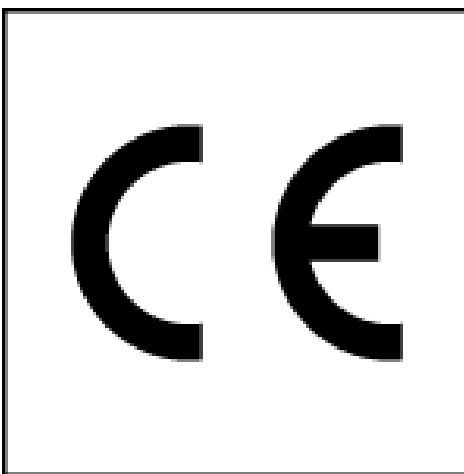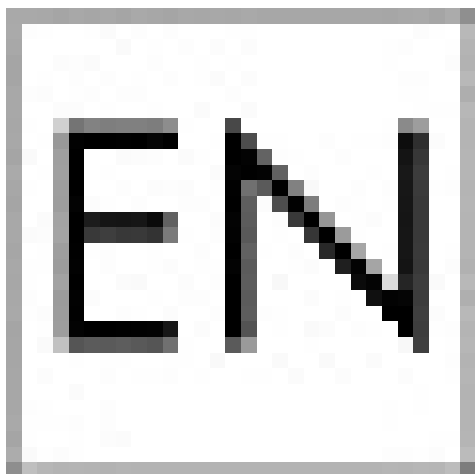

ALLGEMEINE INFORMATIONEN




















1 




 Ideal zur schnellen Homogenisierung biologischer Proben (Zelllyse und Homogenisierung von Weichgewebe) und für Anwendungen, die Flüssigkeiten und Suspensionen, einschließlich Mischungen oder Emulsionen, umfassen. Zehn einstellbare Geschwindigkeitsstufen, die eine Regulierung der Geschwindigkeit zwischen 8000 und 30000 min⁻¹ ermöglichen. Geeignet für Volumen zwischen 0,1 ml und 250 ml. Maximale Viskosität von 5000 mPas. Eingangsleistung von 160 W und Ausgangsleistung von 110 W. Leicht und mit einer Hand bedienbar. Eine Halterung und eine 10 mm Rotor-Stator-Sonde (aus korrosionsbeständigem und autoklavierbarem Edelstahl 316L) inbegriffen; weitere Rotor-Stator-Sonden als Zubehör erhältlich. Außenmaße (L x B x H): 55 x 57 x 210 mm. 200-240 V / 50-60 Hz. Schutzart IP20. Garantie 2 Jahre.



Erfüllt die in der europäischen Richtlinie definierten Spezifikationen

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Beschreibung	Stückzahl pro Artikel
RSHO-250-001	Rotor-Stator-Dispergiergerät, tragbar, RSH-1	1
RSHO-A01-001	Halterung	1
RSHO-A02-001	Rotor-Stator-Sonde, 5 mm	1
RSHO-A03-001	Rotor-Stator-Sonde, 7 mm	1
RSHO-A04-001	Rotor-Stator-Sonde, 10 mm	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
RSHO-250-001	13,68	2,74	8479820090	08434868001831
RSHO-A01-001	6,84	1,79	84799070	08434868001992
RSHO-A02-001	0,117	0,08	84799070	08434868002005
RSHO-A03-001	0,117	0,08	84799070	08434868107991
RSHO-A04-001	0,117	0,08	84799070	08434868108004

